

innerspace

THE SIMULATOR COMPANY

Title: **Usage Manual - HTC Vive Pro**

Document type: **Product Documentation**

Document ID: **PD-13**

Author: Martin Geiger

Owner: Martin Geiger

Reviewer(s): Thomas Heeren
reviewed at 2024-08-02 10:48 (UTC +0100)

Approver(s): Marcus Erdmann
approved at 2024-08-02 11:49 (UTC +0100)

Approval date: 2024-08-02

Effective date: 2024-08-02

Next periodic review date: 2025-08-02



Innerspace Simulator

USAGE MANUAL

HTC Vive Pro



LANGUAGES

English	3
German	7
French	11
Spanish	15
Italian	19
Japanese	23
Russian	27



USAGE MANUAL

ENGLISH

1



**Before Simulator
Usage**

2



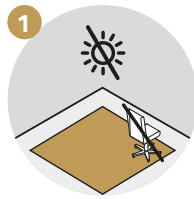
The Simulator Session

3




**After Simulator
Usage**


Before Simulator Usage



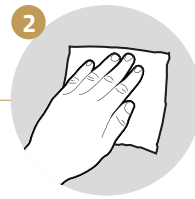
1 Ensure there are no obstacles in the training area, no direct sunlight, and no reflective surfaces.




2 Clean and disinfect the equipment.

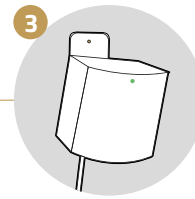

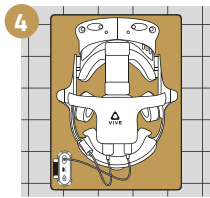
3 Ensure that the base stations are turned on. After a few seconds, the light will turn to green.



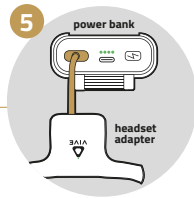
4 Place the headset and power bank on the mat in the middle of the training area.



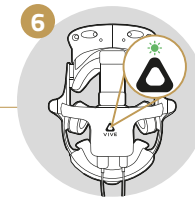
5 Connect the headset adapter to the power bank and switch it on with the button on the power bank.



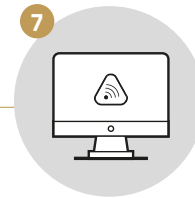
6 A green light appears on the headset adapter.



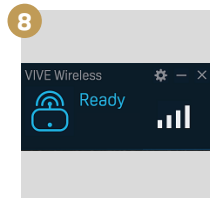
7 Go to the computer and start the VIVE Wireless application.



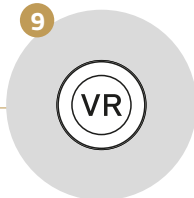
8 Wait until VIVE Wireless is ready. Check if the headset adapter is still active, otherwise re-activate it by clicking the button on top.



9 Start the SteamVR application.

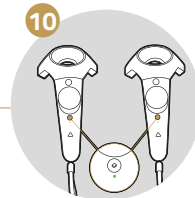

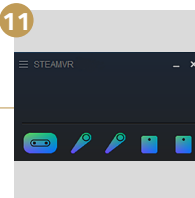10 Switch the controllers on by holding down the button until you hear a beep. A solid blue light will appear on both controllers below this button.



11 Wait until all symbols appear colored. **Note:** The headset and controllers may switch to standby mode. To re-activate them, move them slightly.



12 Start the Simulator Hub application.



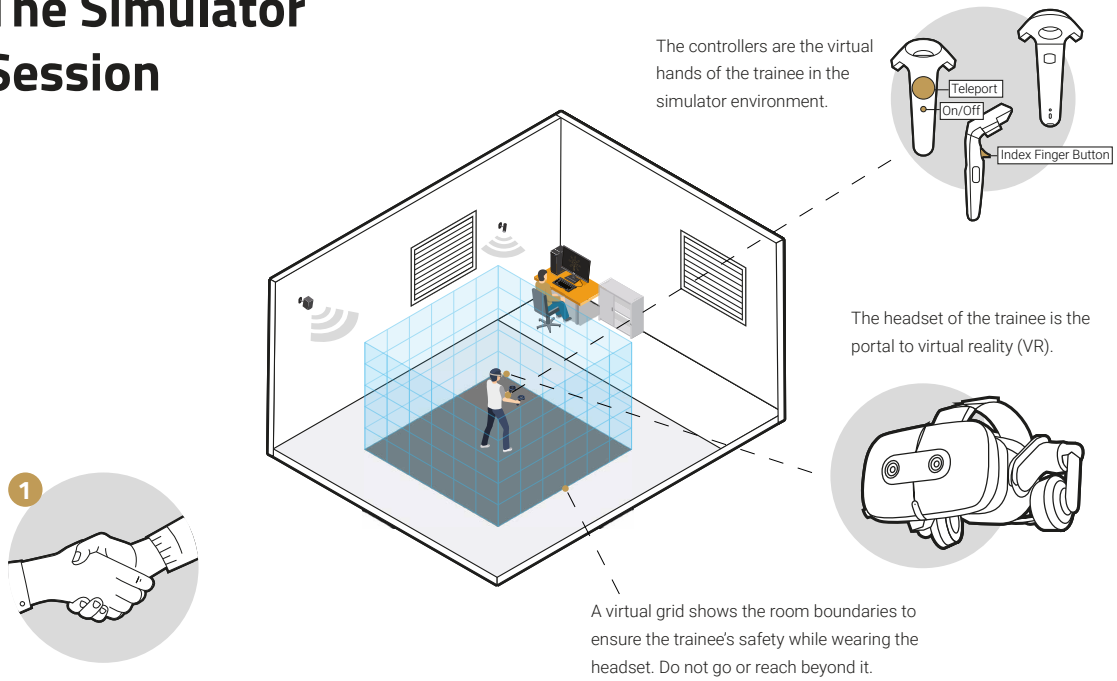
13 Continue with the instructions on the next page.

Questions?

Our troubleshooting guides will help you to solve your issues.

Visit our support portal support.innerspace.eu or contact our helpdesk at support@innerspace.eu


The Simulator Session




Welcome the trainee.



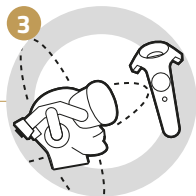
Check if the trainee is aware of the health and safety guidelines.



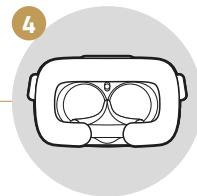
Introduce the trainee to the simulator system and give a brief overview of its content and an introduction to the VR equipment.



Use a new VR hygiene face mask.

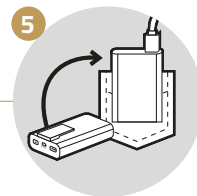

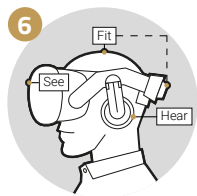
Give the power bank to the trainee and mount it on a belt or pocket.




Help the trainee put on the headset and ensure it is fitted correctly. Let the trainee adjust the headset to achieve a sharper image.



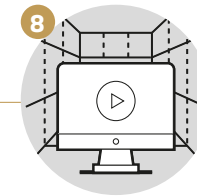Give the controllers to the trainee. The straps must be placed around the wrist and tightened.



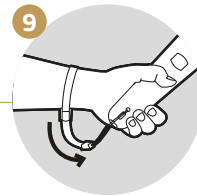
Start the training module on the computer and complete it.




Loosen the straps and take back the controllers from the trainee.



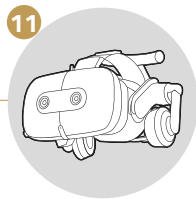
10 Place the controllers on the desk.



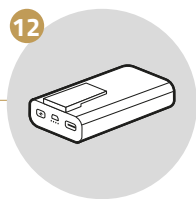
11 Help the trainee take off the headset and welcome them back to the real world.



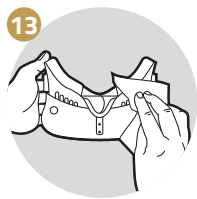12 Take the power bank back from the trainee.



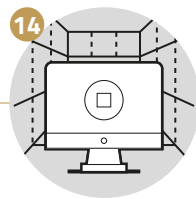
13 Clean and disinfect the VR equipment.




14 Close the training module.

Questions?
Our troubleshooting guides will help you to solve your issues.
Visit our support portal support.innerspace.eu or contact our helpdesk at support@innerspace.eu

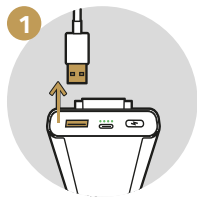
After Simulator Usage



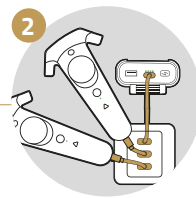1 Disconnect the power bank from the headset adapter.



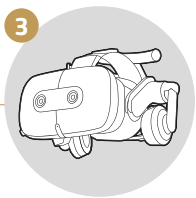2 Connect the power bank and the controllers to the charger.



3 Safely store the equipment in a storage locker. **Note:** Sunlight and moisture may damage the equipment.



4 Close all applications on the computer, but leave the computer on.



5 Clean the workspace.

USAGE MANUAL

GERMAN

1



**Vor der
Simulator-Anwendung**

2



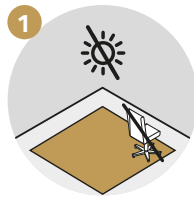
**Anwendung des
Simulators**

3



**Nach der
Simulator-Anwendung**


Vor der Simulator-Anwendung




1 Stelle sicher, dass der Trainingsbereich frei von Gegenständen ist und kein Sonnenlicht oder reflektierende Flächen vorhanden sind.



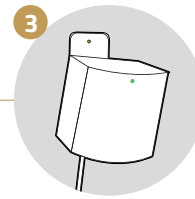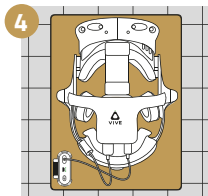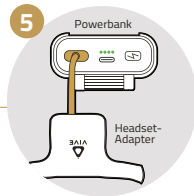
2 Reinige und desinfiziere das Equipment.




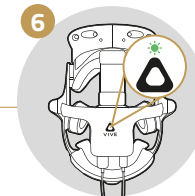
3 Schalte die Sensoren ein. Nach einigen Sekunden wechselt das Licht auf Grün.




4 Lege das Headset und die Powerbank auf die Matte in der Mitte des Trainingsbereichs.




5 Verbinde den Headset-Adapter mit der Powerbank und schalte sie mit der  Taste ein.



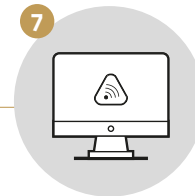
6 Auf dem Headset-Adapter erscheint ein grünes Licht.



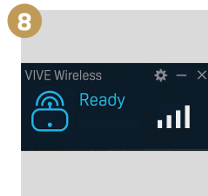
7 Gehe zum PC und starte die VIVE Wireless-Anwendung.




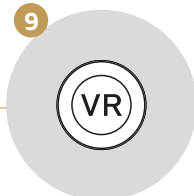
8 Warte bis VIVE Wireless bereit ist. Prüfe, ob der Headset-Adapter noch aktiv ist. Andernfalls reaktiviere ihn mit einem Klick auf die Schaltfläche.




9 Starte die SteamVR-Anwendung.

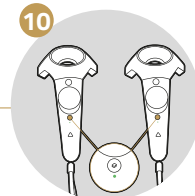

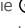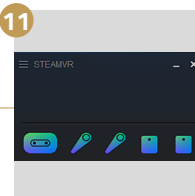10 Schalte die Controller ein, indem du die  Taste gedrückt hältst, bis du einen Piepton hörst. Anschließend erscheint am Controller ein blaues Licht.



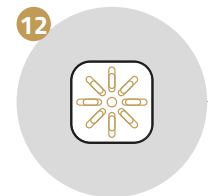11 Warte, bis alle Symbole in Farbe erscheinen. **Hinweis:** Headset und Controller können in den Standby-Modus wechseln. Bewege sie, um sie wieder aufzuwecken.



12 Starte die Simulator Hub-Anwendung.



13 Fahre fort mit den Anweisungen auf der nächsten Seite.

Fragen?

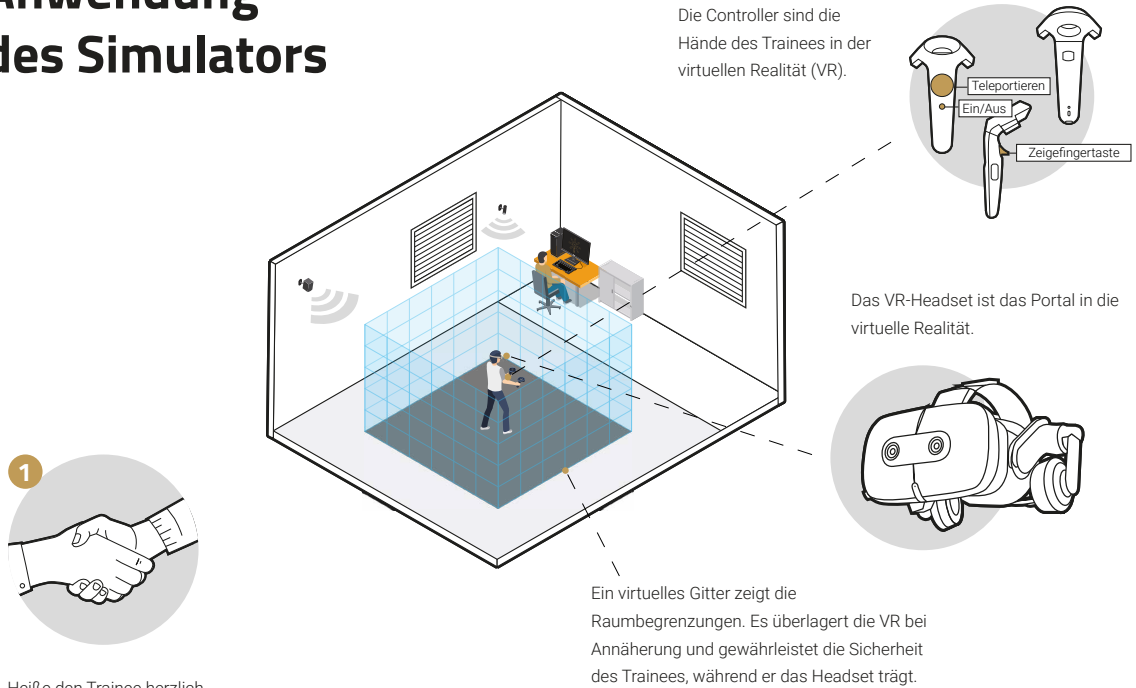
Unsere Leitfäden zur Fehlerbehebung helfen dir, das Problem schnell zu lösen.

Besuche unser Support-Portal support.innerspace.eu

oder wende dich an unseren Helpdesk unter

support@innerspace.eu


Anwendung des Simulators




Heiße den Trainee herzlich willkommen!



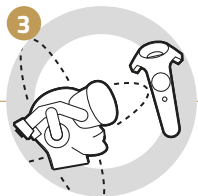
Weise den Trainee in die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien ein.



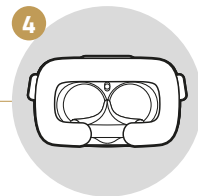
Stelle dem Trainee das Simulator-System vor und gib einen Überblick zum Inhalt.



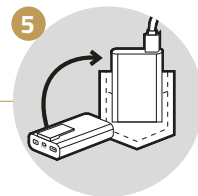Stelle sicher, dass eine frische VR-Hygienemaske verwendet wird.



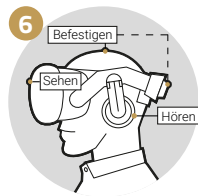
Die Powerbank muss entweder am Gürtel oder an der Hosentasche des Trainees befestigt werden.




Hilf dem Trainee beim Aufsetzen des VR-Headsets und stelle sicher, dass es richtig sitzt.



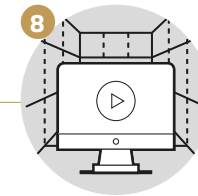Gib dem Trainee die Controller. Die Bänder müssen um das Handgelenk gelegt und festgezogen werden.



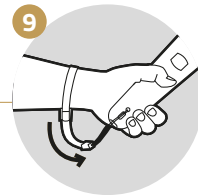
Starte das Trainingsmodul am PC und schließe es ab.




Nachdem die Anwendung beendet ist, hilf dem Trainee beim Lösen der Bänder und nimm die Controller zurück.



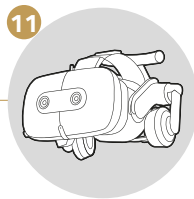
10
Lege die Controller auf den Tisch.



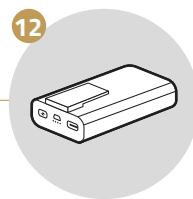
11
Unterstütze den Trainee beim Abnehmen des Headsets.



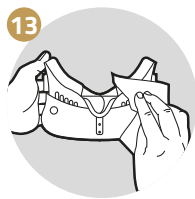12
Nimm die Powerbank vom Trainee zurück.



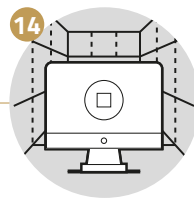13
Reinige und desinfiziere den Controller sowie das VR-Headset sorgfältig.




14
Beende das Trainingsmodul.

Fragen?


Unsere Leitfäden zur Fehlerbehebung helfen dir, das Problem schnell zu lösen.

Besuche unser Support-Portal support.innerspace.eu oder wende dich an unseren Helpdesk unter support@innerspace.eu

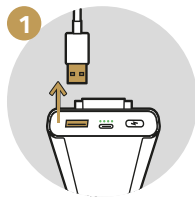
Nach der Simulator-Anwendung



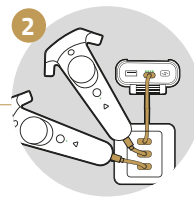1
Trenne die Powerbank vom Headset-Adapter.



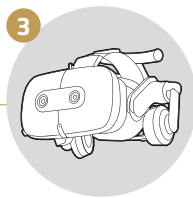2
Verbinde die Controller und die Powerbank mit dem USB-Ladegerät.



3
Das VR-Equipment sollte sicher aufbewahrt werden. **Hinweis:** Das Equipment vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.



4
Schließe alle Anwendungen am PC, aber lass den PC eingeschaltet.



5
Reinige den Arbeitsplatz.

USAGE MANUAL

FRENCH

1

**Avant l'utilisation du
simulateur**

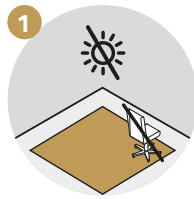
2

Utilisation du simulateur

3

**Après l'utilisation du
simulateur**


Avant l'utilisation du simulateur




1 Assure-toi de l'absence de lumière solaire directe, de surfaces réfléchissantes et d'obstacles dans la zone de formation.



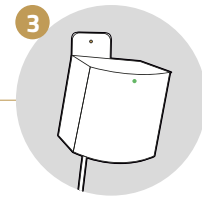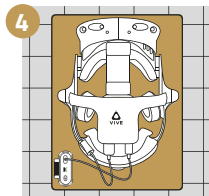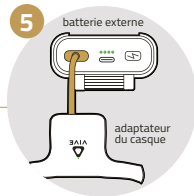
2 Nettoie et désinfecte l'équipement.




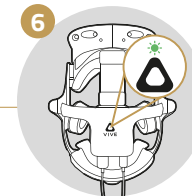
3 Allume les capteurs. Après quelques secondes, le témoin devient vert.




4 Place le casque et la batterie externe sur le tapis au centre de la zone de formation.




5 Connecte l'adaptateur du casque à la batterie et allume la batterie avec son bouton .



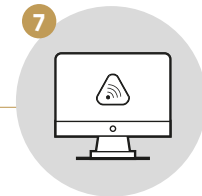
6 Un témoin vert s'allume sur l'adaptateur du casque.



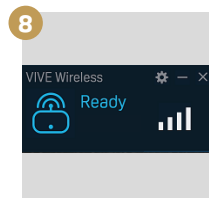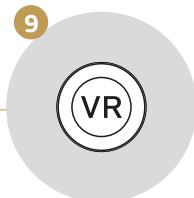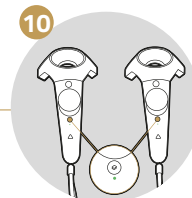
7 Va à l'ordinateur et lance l'application VIVE Wireless.




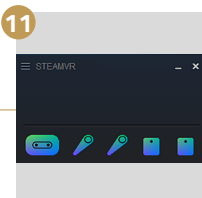
8 Attends que VIVE Wireless soit prêt. Vérifie que l'adaptateur du casque est toujours actif. Dans le cas contraire, réactive-le en cliquant sur le bouton.



9 Démarre l'application SteamVR.



10 Allume les contrôleurs en maintenant appuyé le bouton  jusqu'au bip sonore. Ensuite, un témoin bleu apparaît sur le contrôleur.



11 Attends que tous les symboles s'affichent en couleurs. **Attention:** Le casque et les contrôleurs peuvent passer en mode veille. Bouge-les pour les réactiver.



12 Démarre l'application de Simulator Hub.



13 Continue avec les instructions de la page suivante.

Des questions ?

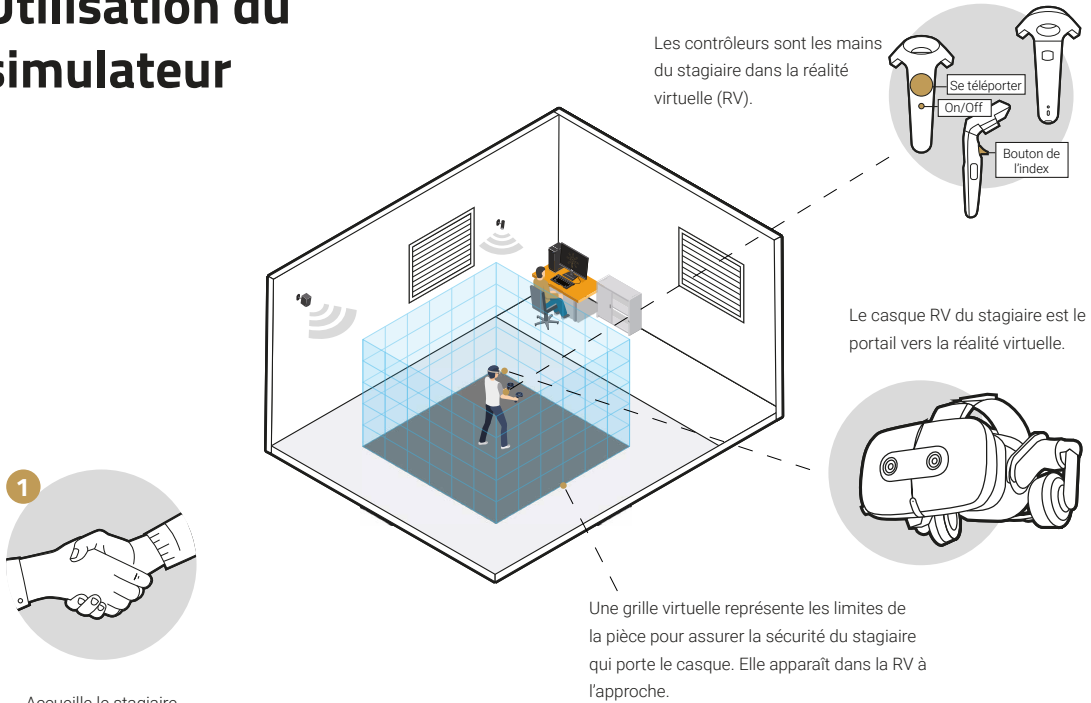
Nos guides de dépannage vous aident à résoudre les problèmes.

Visite notre centre d'assistance support.innerspace.eu

ou contacte notre service d'assistance à l'adresse

support@innerspace.eu


Utilisation du simulateur




Accueille le stagiaire.



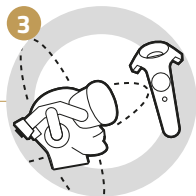
Informe le stagiaire des consignes de santé et de sécurité.



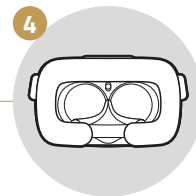
Présente au stagiaire le système simulateur et expose-lui brièvement son contenu.



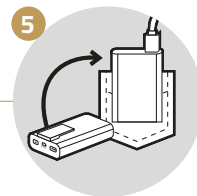Utilise un masque facial d'hygiène RV neuf.



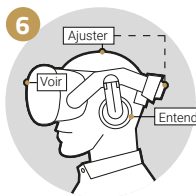
Place la batterie externe à la ceinture ou dans la poche du stagiaire.




Aide le stagiaire à mettre le casque RV et assure-toi de son bon ajustement.



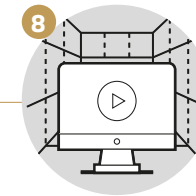Donne au stagiaire les contrôleurs. Place les sangles sur les poignets du stagiaire et serre-les.



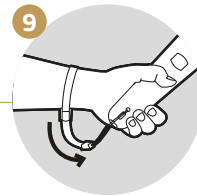
Lance le module de formation sur l'ordinateur et termine-le.




Une fois l'utilisation terminée, desserre les sangles et récupère les contrôleurs.



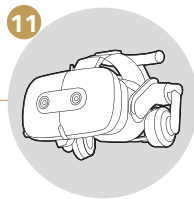
10 Pose les contrôleurs sur la table.



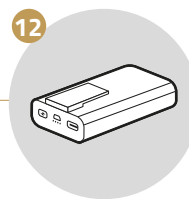
11 Aide le stagiaire à retirer le casque.



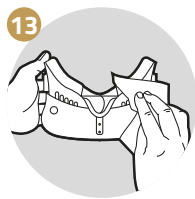12 Retire la batterie externe du stagiaire.



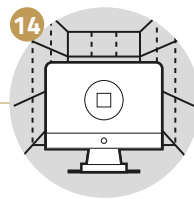13 Nettoie et désinfecte soigneusement les contrôleurs ainsi que le casque RV.




14 Ferme le module de formation.

Des questions ?


Nos guides de dépannage vous aident à résoudre les problèmes.

Visite notre centre d'assistance support.innerspace.eu ou contacte notre service d'assistance à l'adresse support@innerspace.eu

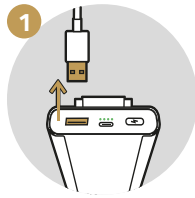
Après l'utilisation du simulateur



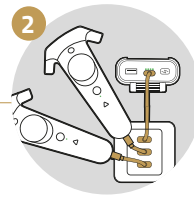1 Déconnecte la batterie externe de l'adaptateur du casque.



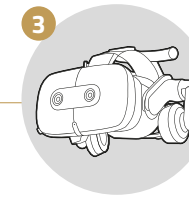2 Connecte les contrôleurs et la batterie au chargeur USB.



3 L'équipement RV doit être conservé en toute sécurité. **Attention:** Protéger l'équipement des rayons du soleil et de l'humidité.



4 Ferme toutes les applications sur l'ordinateur, mais laisse-le allumé.



5 Nettoie l'espace de travail.

USAGE MANUAL

SPANISH

1



**Antes de utilizar el
simulador**

2



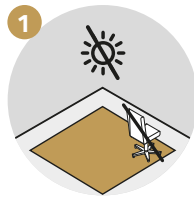
Utilizar el simulador

3



**Después de utilizar el
simulador**


Antes de utilizar el simulador




1 Asegúrate de que no haya ningún obstáculo, luz solar directa ni superficies reflectantes dentro del área de formación.



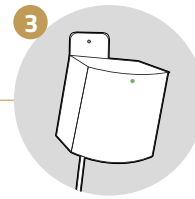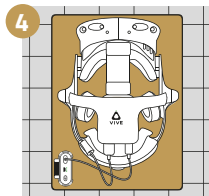2 Limpia y desinfecta el equipo.




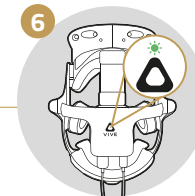
3 Enciende los sensores. Transcurridos unos segundos, la luz cambia a verde.




4 Deja las gafas y la batería externa en la alfombrilla, en el centro del área de formación.




5 Conecta el adaptador de las gafas a la batería externa y pulsa el botón  para encenderlo.



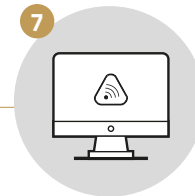
6 Se enciende una luz verde en el adaptador de las gafas.



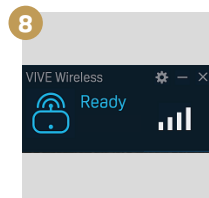
7 Dirígete al ordenador e inicia la aplicación VIVE Wireless.




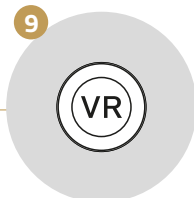
8 Espera a que aparezca la indicación «Ready» en VIVE Wireless. Comprueba si el adaptador de las gafas sigue activo. De lo contrario, pulsa el botón para reactivarlo.



9 Inicia la aplicación SteamVR.

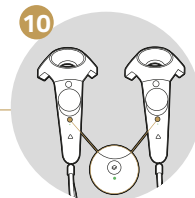

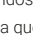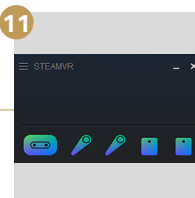10 Enciende los mandos apretando el botón  hasta que oigas un pitido. Se encenderá una luz azul permanente en ambos mandos.



11 Espera a que todos los iconos aparezcan coloreados. **Nota:** las gafas y los mandos pueden ponerse en modo standby. Muévelos para reactivarlos.



12 Inicia la aplicación Simulator Hub.



13 Continúa con las instrucciones de la página siguiente.

¿Alguna duda?

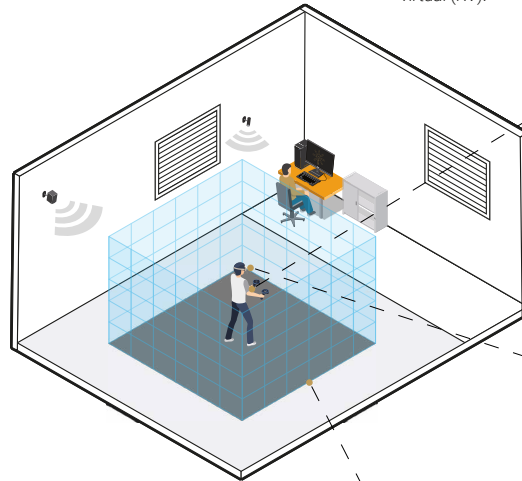
Resuélvela rápidamente consultando nuestras guías de solución de problemas.

Visita nuestro centro de ayuda en support.innerspace.eu o ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica enviando un e-mail a support@innerspace.eu


Utilizar el simulador




Da la bienvenida al alumno.



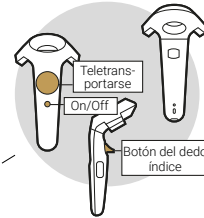Los mandos son las manos del alumno en la realidad virtual (RV).



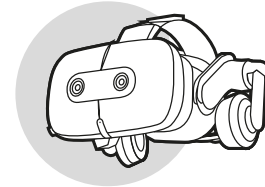
Las gafas de RV son la puerta de entrada a la realidad virtual.




Los límites de la sala se muestran mediante una cuadrícula virtual que se superpone a la RV al acercarse, garantizando la seguridad del alumno mientras lleva puestas las gafas.



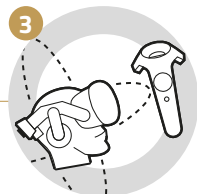
Explica brevemente al alumno las normas sanitarias y de seguridad.



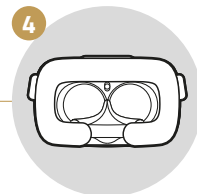
Presenta el sistema del simulador al alumno y explícale resumidamente el contenido.



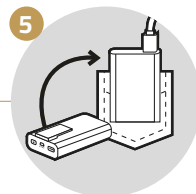Asegúrate de que el alumno utilice un protector higiénico nuevo al ponerse las gafas de RV.



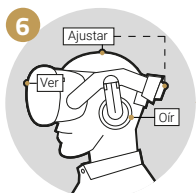
Fija la batería externa al cinturón o al bolsillo del alumno.




Ayuda al alumno a ponerse las gafas de RV, asegurándote de que queden bien ajustadas.



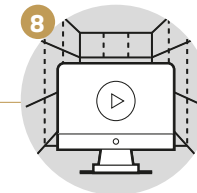Da los mandos al alumno. Hay que ajustar bien las correas a las muñecas.



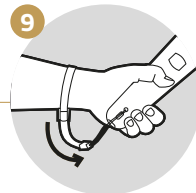
Inicia el módulo de formación en el ordenador y complétalo.




Una vez finalizada la aplicación, ayuda al alumno a aflojar las correas y toma los mandos.



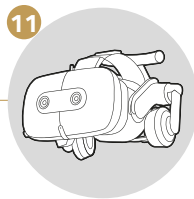
10
Deja los mandos sobre la mesa.



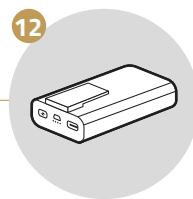
11
Ayuda al alumno a quitarse las gafas.



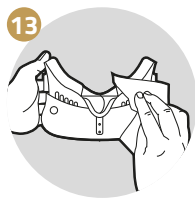12
Retira la batería externa del alumno.



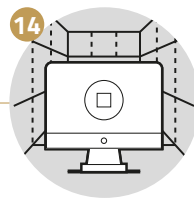13
Limpia y desinfecta los mandos y las gafas de RV cuidadosamente.




14
Cierra el módulo de formación.

¿Alguna duda?


Resuélvela rápidamente consultando nuestras guías de solución de problemas.

Visita nuestro centro de ayuda en support.innerspace.eu o ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica enviando un e-mail a support@innerspace.eu

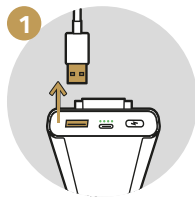
Después de utilizar el simulador



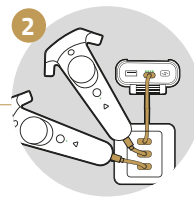1
Desconecta la batería externa del adaptador de las gafas.



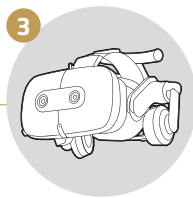2
Conecta los mandos y la batería externa al cargador USB.



3
Guarda el equipo de RV en un lugar seguro.
Nota: mantener el equipo en un lugar seco y alejado de la luz solar.



4
Cierra todas las aplicaciones en el ordenador, pero deja el ordenador encendido.



5
Limpia el lugar de trabajo.

USAGE MANUAL

ITALIAN

1



**Prima dell'uso del
simulatore**

2



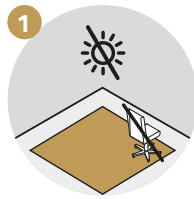
Uso del simulatore

3



**Dopo l'uso del
simulatore**


Prima dell'uso del simulatore




1 Assicurati che l'area di allenamento sia priva di oggetti e non vi sia luce solare né superfici che fungono da specchio.



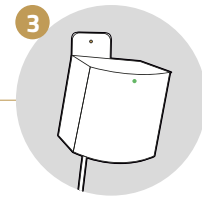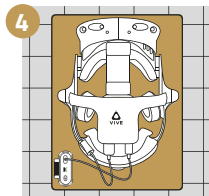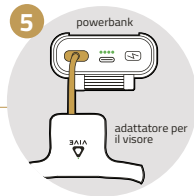
2 Pulisci e disinfetta l'attrezzatura.




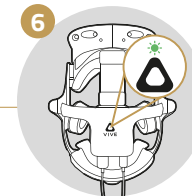
3 Accendi i sensori. Dopo qualche secondo, la luce diventerà verde.




4 Posiziona il visore e il powerbank sul tappetino, al centro dell'area adibita all'allenamento.




5 Collega l'adattatore per il visore al powerbank e accendilo premendo il tasto .



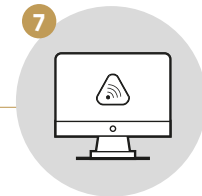
6 La luce dell'adattatore del visore diventerà verde.



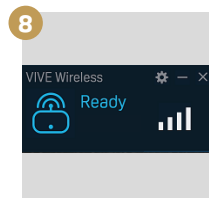
7 Vai al computer e avvia l'applicazione VIVE Wireless.




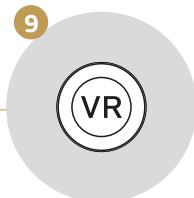
8 Aspetta fino a quando VIVE Wireless non sarà avviato. Verifica che l'adattatore del visore sia ancora in funzione. Qualora non dovesse esserlo, riattivalo con un click sulla barra dei comandi.




9 Avvia l'applicazione SteamVR.

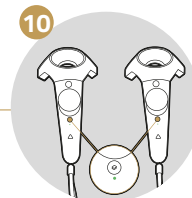

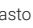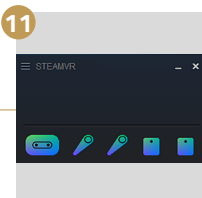10 Accendi i controller tenendo premuto il tasto  fino a quando non sentirai il segnale acustico. Successivamente comparirà sul controller una luce blu.



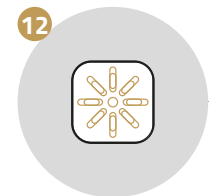11 Resta in attesa fino a quando tutti i simboli colorati saranno comparsi. **Avviso:** il visore e i controller possono entrare in modalità standby. Muovili, per farli uscire dallo standby.



12 Avvia l'applicazione Simulator Hub.



13 Continua a seguire le istruzioni sulla pagina seguente.

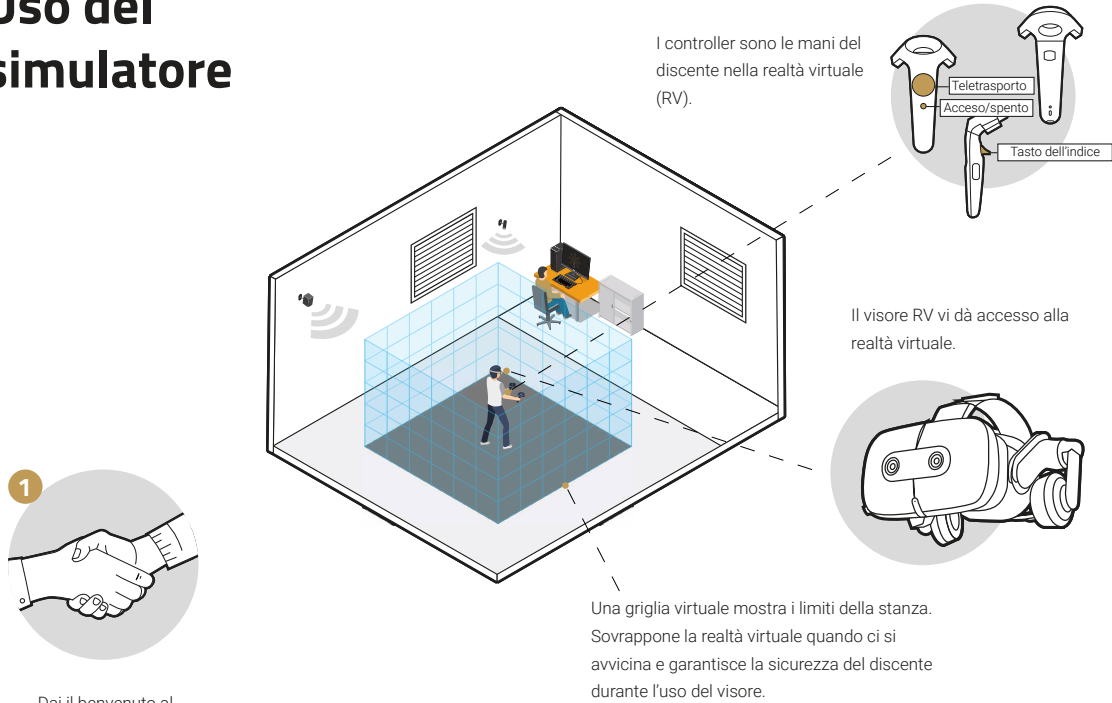
Hai delle domande?

Le nostre guide per la risoluzione di problemi ti aiutano a risolvere i problemi rapidamente.

Visita il nostro portale per l'assistenza support.innerspace.eu o rivolgiti al nostro servizio di assistenza all'indirizzo

support@innerspace.eu


Uso del simulatore




Dai il benvenuto al discendente!



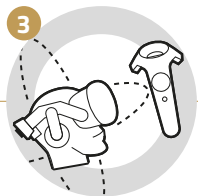
Illustra al discendente le linee guida in materia di igiene e sicurezza.



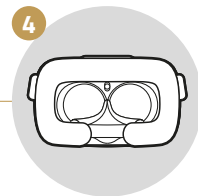
Presenta al discendente il sistema del simulatore e forniscigli una panoramica dei contenuti.



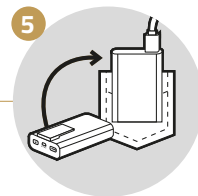Assicurati che venga utilizzata una maschera igienica pulita per il visore RV.



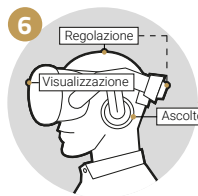
Fissa il powerbank o alla cintura o alla tasca dei pantaloni del discendente.




Aiuta il discendente a indossare il visore RV e assicurati che sia posizionato correttamente.



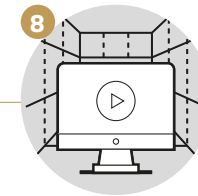Dai i controller al discendente. I lacci devono essere legati intorno al polso e venire tirati.



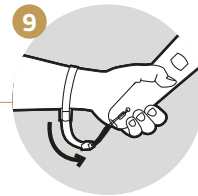
Avvia il modulo di allenamento nel computer e completalo.




Al termine dell'uso dell'applicazione, aiuta il discendente a togliersi i controller e riprendili.



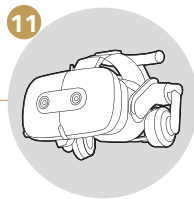
10 Metti i controller sul tavolo.



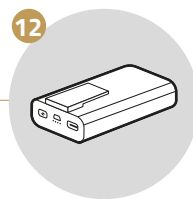
11 Aiuta il discente a togliersi il visore.



12 Riprenditi il powerbank.

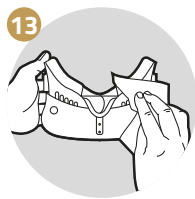

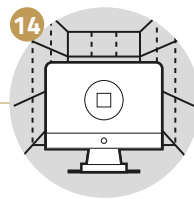13 Pulisci e disinfetta con attenzione il controller e il visore RV.




14 Chiudi il modulo di allenamento.

Hai delle domande?


Le nostre guide per la risoluzione di problemi ti aiutano a risolvere i problemi rapidamente.

Visita il nostro portale per l'assistenza support.innerspace.eu o rivolgiti al nostro servizio di assistenza all'indirizzo support@innerspace.eu

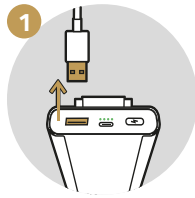
Dopo l'uso del simulatore



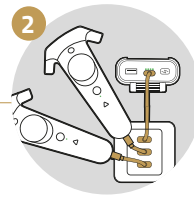1 Stacca il powerbank dall'adattatore del visore.



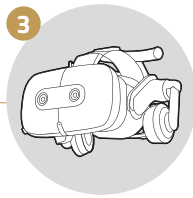2 Collega i controller e il powerbank al cavo di ricarica USB.



3 L'attrezzatura per la RV deve essere conservata in un luogo sicuro. **Avviso:** conservare l'attrezzatura lontano dalla luce del sole e da fonti di umidità.



4 Chiudi tutte le applicazioni nel computer, ma lascialo acceso.



5 Pulisci l'area di lavoro.

USAGE MANUAL

JAPANESE

1



シミュレーターを使用
する前に

2



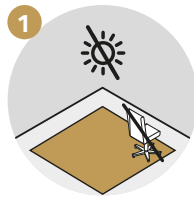
シミュレーターの使用方法

3



シミュレーターを使用した後


シミュレーター を使用する 前に




1 トレーニングエリアに障害物がないか、さらに直射日光が入らず反射している面がないかを確認してください。



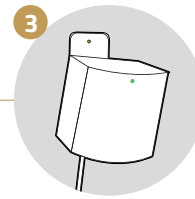2 機器を掃除し、消毒してください。




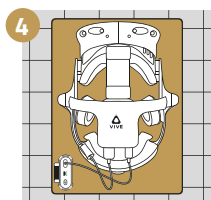
3 ベースステーションのセンサーをONにします。数秒後、ライトが緑色に変わります。



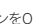4 ヘッドセットとバッテリーをトレーニングエリアの中央にあるマットの上に置きます。



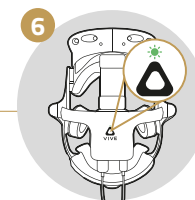
5 ヘッドセットアダプターをバッテリーに接続し、バッテリーの  ボタンをONにします。




6 ヘッドセットアダプターに緑色のライトが点灯します。



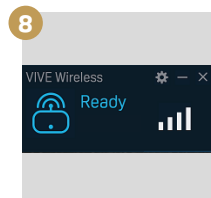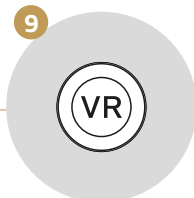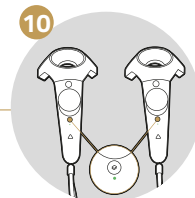
7 コンピューターのところに行き、VIVE Wirelessアプリケーションを起動します。




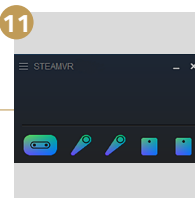
8 VIVE Wirelessがスタンバイになるまで待ってください。ヘッドセットアダプターがアクティブな状態であるかを確認してください。そうでない場合には、ボタンをクリックして再度アクティブな状態にしてください。




9 SteamVRアプリケーションを起動します。



10 ピープ音が聞こえるまで  ボタンを押し、コントローラーをONにします。続いてコントローラーの青いライトが点灯します。



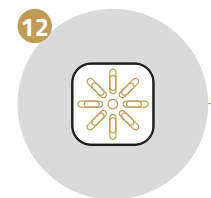11 すべてのシンボルがカラーで表示されるまで待ちます。注意：ヘッドセットとコントローラーがスタンバイモードに切り替わることがあります。その場合は少し動かすことで、再度アクティブになります。



12 Simulator Hubアプリケーションを起動します。



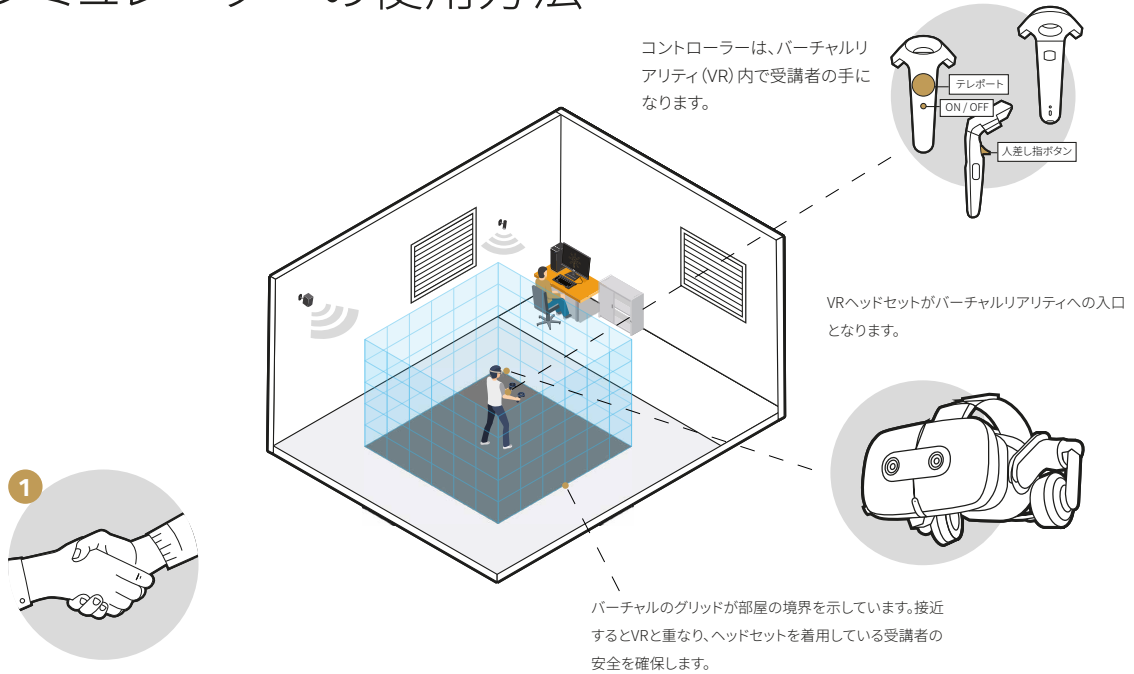
13 説明書に従って、次のページへ進んでください。

質問はありますか？

トラブルシューティングガイドは、問題の解決に役立ちます。

当社のサポートポータル support.innerspace.eu を参照、またはヘルプデスク support@innerspace.eu までお問い合わせください


シミュレーターの使用方法




受講者を歓迎しましょう。



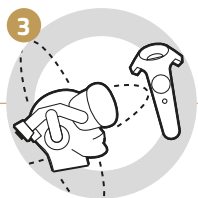
健康と安全に関するガイドラインを受講者に説明します。



受講者に Simulator システムを紹介し、その概要を説明します。

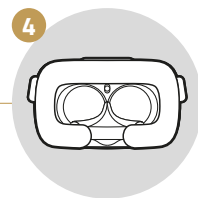

必ず、新しいVR用衛生マスクを使用するよう確認してください。

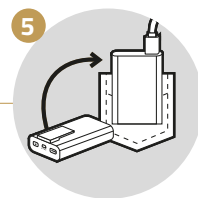


バッテリーを受講者のベルトかポケットに装着します。




受講者がVRヘッドセットを装着するのを手伝い、正しく装着されていることを確認してください。



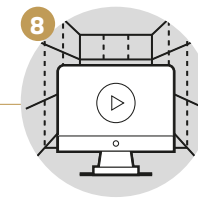受講者にコントローラーを渡してください。ストラップはしっかりと手首に取り付けて締めます。




PCのトレーニングモジュールをスタートしてモジュールを終了してください。

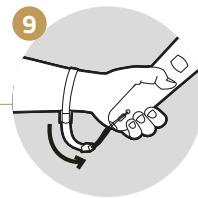


終了したら、ストラップをゆるめ、受講者からコントローラーを取り外します。



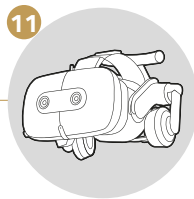
10
コントローラーをデスクの
上に置いてください。




11
受講者がヘッドセットを外すのを手伝って
ください。

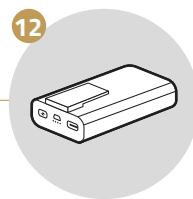

12
受講者からバッテリーを返却して
もらいます。

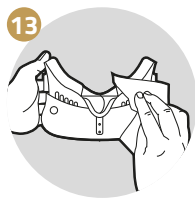

13
コントローラーとVRヘッドセット
を掃除し消毒します。

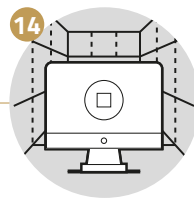


14
トレーニングモジュールを終了して
ください。

質問はありますか？


トラブルシューティングガイドは、問題の解決に
役立ちます。

当社のサポートポータルsupport.innerspace.euを
参照、またはヘルプデスクsupport@innerspace.eu
までお問い合わせください

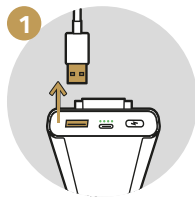
シミュレーターを使用した後



1
ヘッドセットアダプターからバッテリー
を外します。

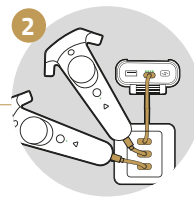

2
コントローラーとバッテリーをUSB
充電器に接続してください。

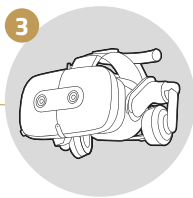

3
VR機器は安全な場所に保管するよう
にしてください。注意：直射日光や湿気を
避けて保管してください。



4
コンピューターのすべてのアプリ
ケーションを終了してください。
ただ、コンピューターの電源は
入れたままにしてください。



5
デスクなど使用した場所を
掃除してください。

USAGE MANUAL

RUSSIAN

1



**Перед
использованием
симулятора**

2



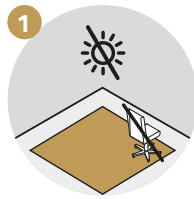
**Использование
симулятора**

3




**После использования
симулятора**


Перед использованием симулятора



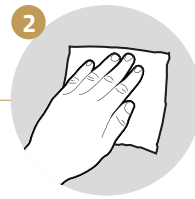
1 Убедись, что в тренировочной зоне нет никаких предметов, солнечного света или отражающих поверхностей.



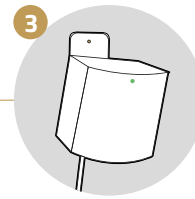2 Почисти и продезинфицируй оборудование.



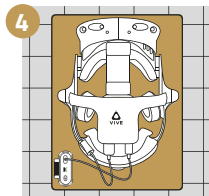
3 Включи датчики. Через несколько секунд свет поменяется на зеленый.




4 Положи гарнитуру и портативный аккумулятор на коврик в центре тренировочной зоны.



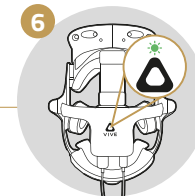
5 Подключи адаптер гарнитуры к аккумулятору и включи его, нажав на кнопку



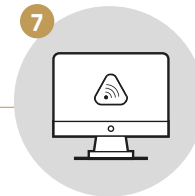
6 На адаптере гарнитуры загорится зеленая лампочка.



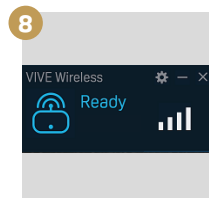
7 Подойди к компьютеру и запусти приложение VIVE Wireless.



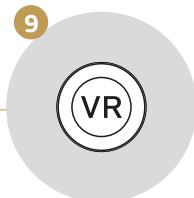
8 Подожди, пока заработает приложение VIVE Wireless. Проверь, активен ли адаптер гарнитуры. Если нет, то повторно активируй его, нажав на командную кнопку.



9 Запусти приложение SteamVR.

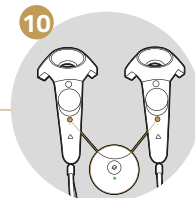


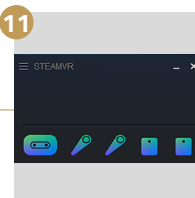10 Включи контроллеры, удерживая кнопку , пока не услышишь звуковой сигнал. Затем на контроллерах загорятся синие лампочки.



11 Дождись, пока все символы станут цветными.

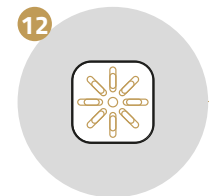Примечание. Гарнитура и контроллеры могут перейти в спящий режим. Подвигай их, чтобы снова их активировать.



12 Запусти приложение Simulator Hub.



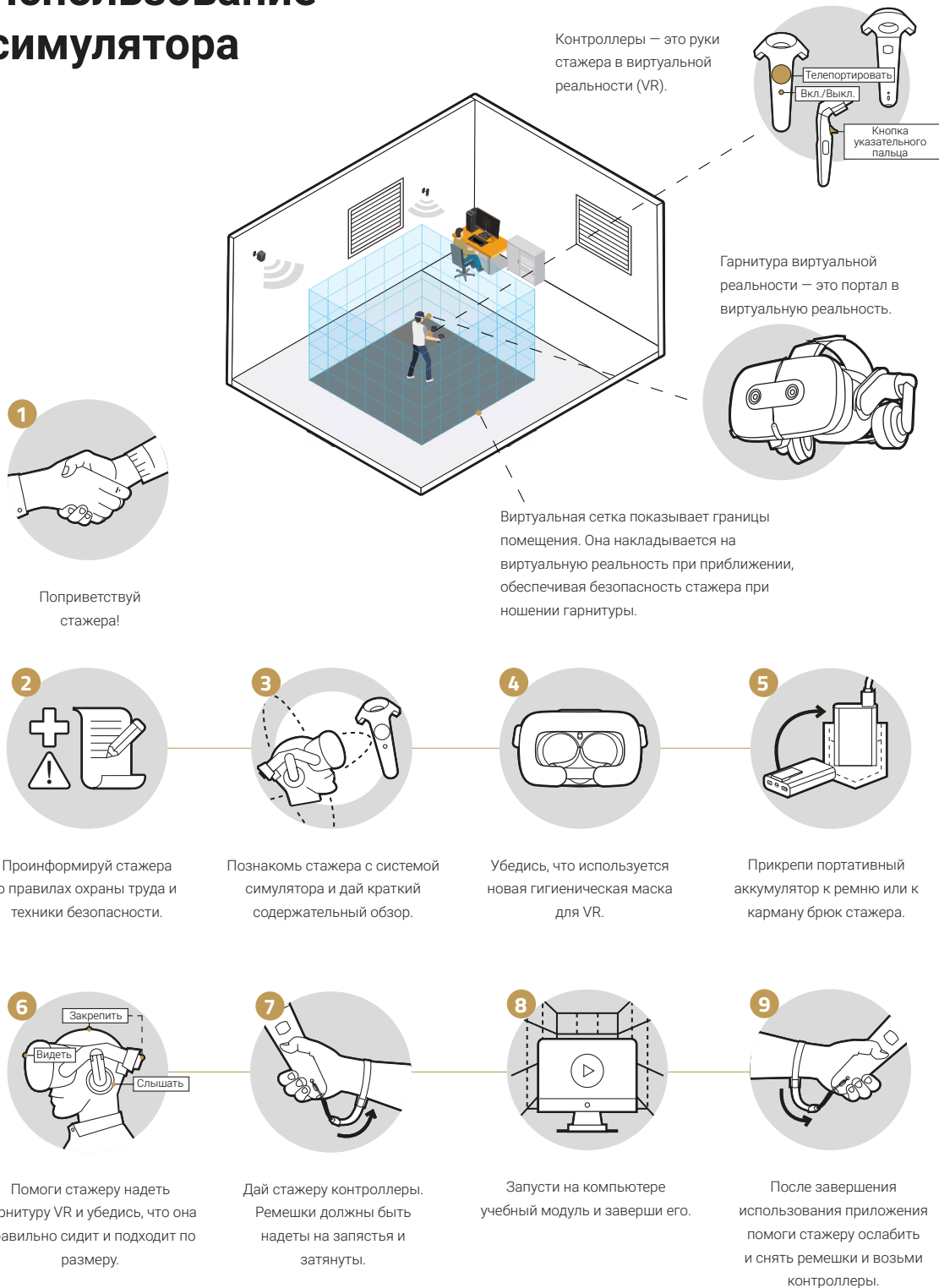
13 Следуй инструкциям на следующей странице.

Возникли вопросы?

Наши руководства по устранению неполадок помогут тебе быстро решить проблему.


Загляни на наш портал поддержки на сайте support.innerspace.eu или свяжись с нашей службой поддержки по адресу support@innerspace.eu

Использование симулятора







10 Положи контроллеры на стол.

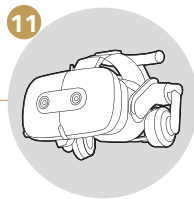


11 Помоги стажеру снять гарнитуру.

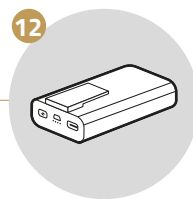

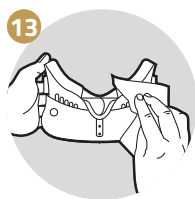12 Забери портативный аккумулятор у стажера.



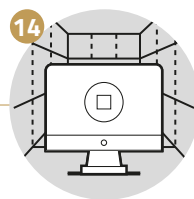13 Тщательно очисти и продезинфицируй контроллеры и VR-гарнитуру.




14 Закончи учебный модуль.

Возникли вопросы?


Наши руководства по устранению неполадок помогут тебе быстро решить проблему.

Загляни на наш портал поддержки на сайте support.innerspace.eu или свяжись с нашей службой поддержки по адресу support@innerspace.eu

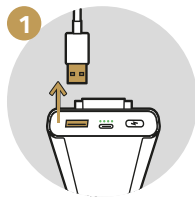
После использования симулятора



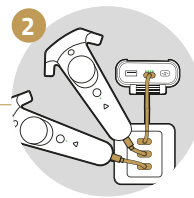1 Отсоедини адаптер гарнитуры от аккумулятора.



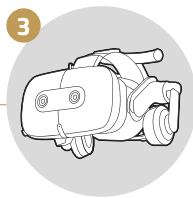2 Подключи контроллеры и аккумулятор к зарядному устройству USB.



3 VR-оборудование должно безопасно храниться.

Примечание. Оборудование должно быть защищено от солнечного света и влаги.



4 Закрой все приложения на компьютере, но оставь его включённым.



5 Почисти рабочее место.

Innerspace

THE SIMULATOR COMPANY



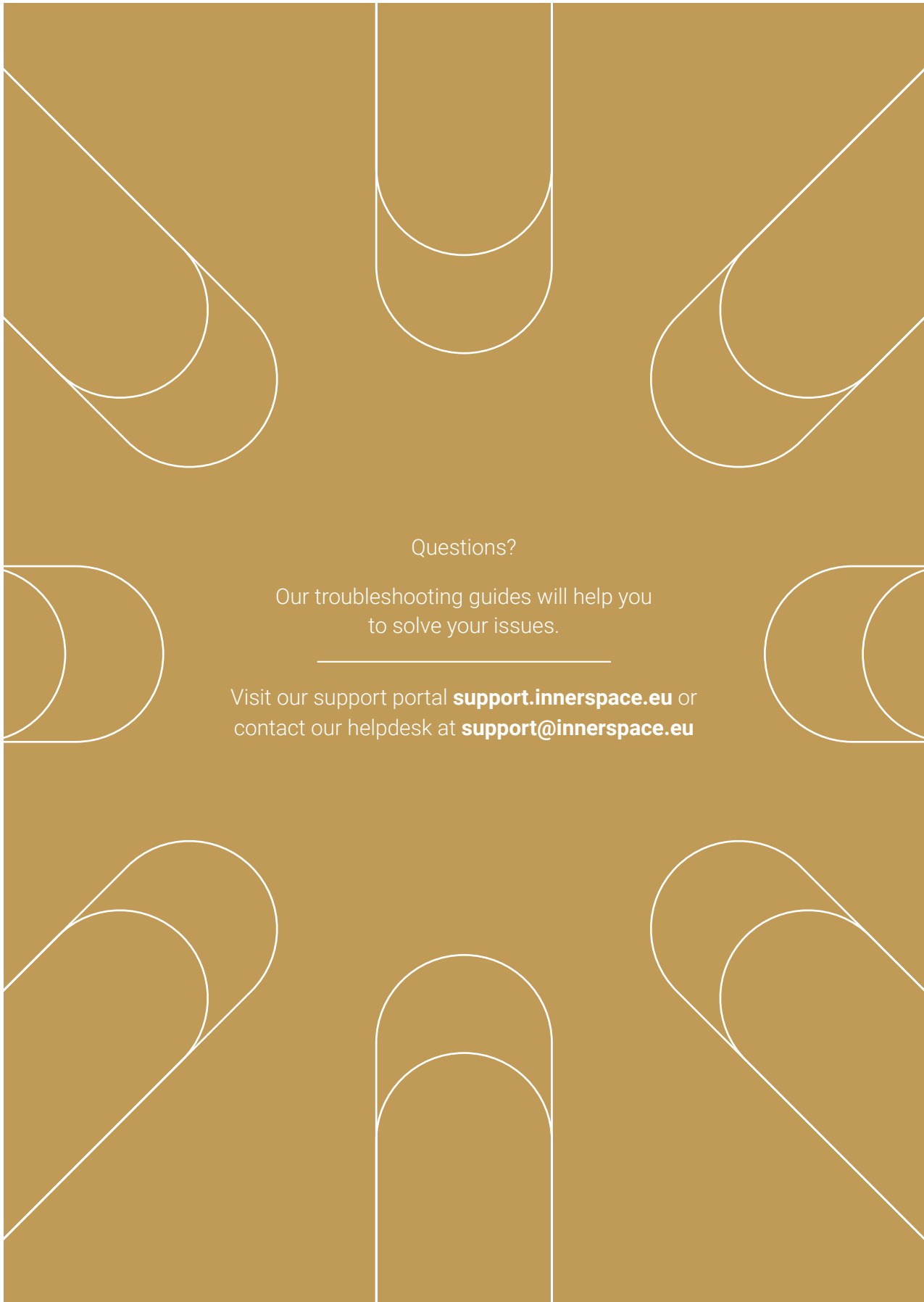
INNERSPACE GmbH • Helga-Krismer-Platz 1 • 6020 Innsbruck • Austria

office@innerspace.eu • www.innerspace.eu

© Innerspace GmbH

Document Version 1.3





Questions?

Our troubleshooting guides will help you
to solve your issues.

Visit our support portal support.innerspace.eu or
contact our helpdesk at support@innerspace.eu