

innerspace

THE SIMULATOR COMPANY

Innerspace Simulator

USAGE MANUAL

Meta Quest 3



Die Schritte in diesem Dokument sind so gestaltet, dass sie mit Unterstützung eines Trainers durchgeführt werden. Die Schritte können aber auch vom Trainee selbständig durchgeführt werden.

USAGE MANUAL

1



Vor dem Training

2




Während des Trainings

3



Nach dem Training

Vor dem Training

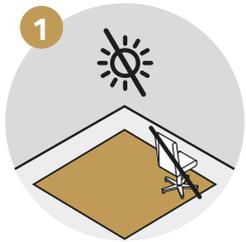

1 Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse im Trainingsbereich, kein direktes Sonnenlicht und keine reflektierenden Oberflächen gibt.




2 Reinigen und desinfizieren Sie die Geräte.




3 Legen Sie einen voll aufgeladenen Akku aus dem Ladedock in den Schlitz auf dem Headset.



4 Starten Sie die ALVR-Anwendung auf dem Laptop, die automatisch die SteamVR-Anwendung öffnet.

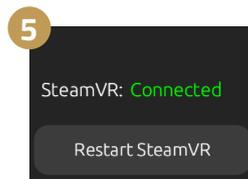

5 Das ALVR-Dashboard ist nun sichtbar und zeigt in der unteren linken Ecke an, dass SteamVR verbunden ist.

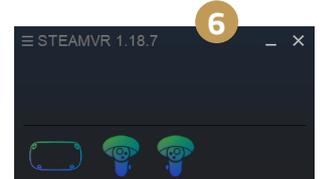

6 In SteamVR erscheinen die Headset- und Controller-Symbole. Diese werden im Standby-Modus angezeigt, wenn sie nicht aktiv verwendet werden.



7 Starten Sie die Innerspace Simulator Hub Anwendung auf dem Laptop.

Fragen?



Unsere Anleitungen zur Fehlerbehebung helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme.

Besuchen Sie unser Support-Portal

support.innerspace.eu oder kontaktieren Sie unseren


Helpdesk unter support@innerspace.eu

Während des Trainings

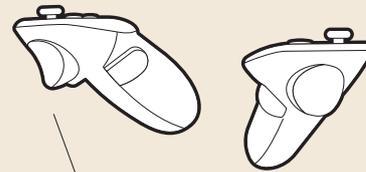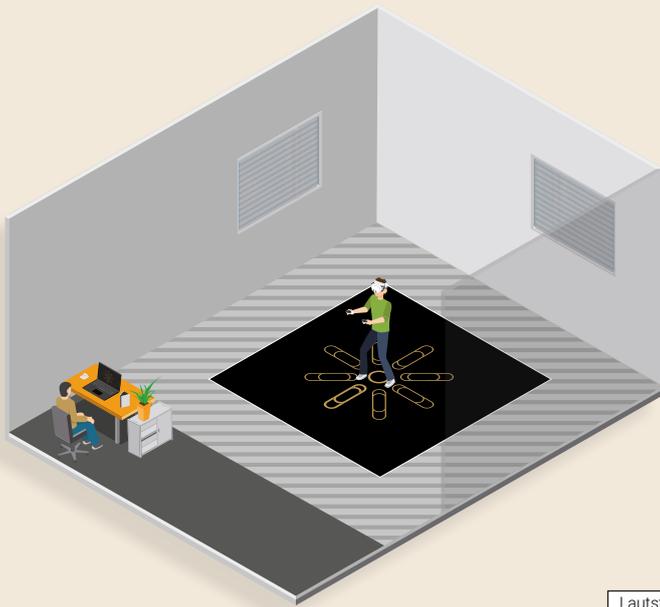

Zeigefinger-Taste

Die Controller sind die virtuellen Hände des Trainees in der Simulatorumgebung.

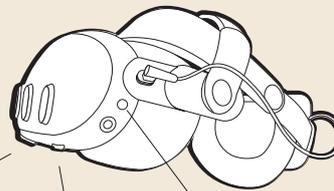

Lautstärkeregelung

Augendistanzkontrolle

Ein/Aus-Taste

Das Headset des Trainees ist das Portal zur virtuellen Realität (VR).




1

Begrüßen Sie den Trainee.




2

Stellen Sie sicher, dass der Trainee mit den Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien vertraut ist und die Lernziele des Moduls versteht.

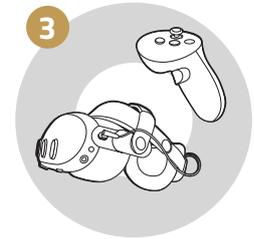


3

Führen Sie den Trainee in das Simulatorsystem und das VR-Equipment ein.

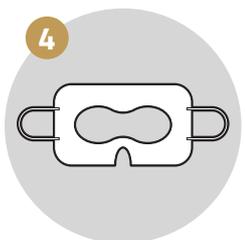


4

Helfen Sie dem Trainee, die VR-Gesichtsmaske anzulegen. Stellen Sie sicher, dass die Maske das Gesicht bedeckt, die Augen frei lässt und die Gummibänder über den Ohren befestigt sind.

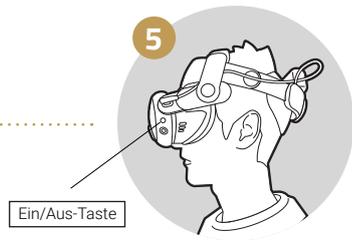


5

Helfen Sie dem Trainee beim Aufsetzen des Headsets. Wenn das Headset ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang drücken. Lassen Sie den Trainee das Headset justieren, um ein schärferes Bild zu erhalten.

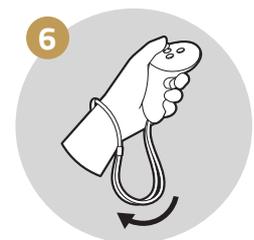


6


Geben Sie dem Trainee die Controller. Die Bänder müssen um das Handgelenk gelegt und festgezogen werden.

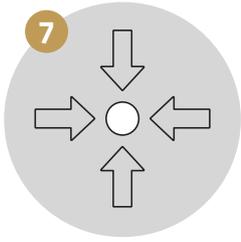

Führen Sie den Trainee zur Mitte des Trainingsbereichs. Achten Sie darauf, dass der Trainee dem Gerätetisch mit dem Streaming-Router zugewandt ist, um ein optimales VR-Erlebnis zu gewährleisten.

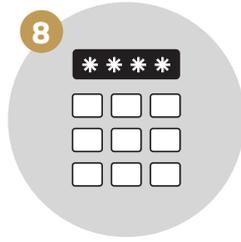

Weisen Sie den Trainee an, die PIN 0000 mit Hilfe der Zeigefinger-Taste auf der Rückseite des Controllers einzugeben, und auf "Continue" zu drücken.

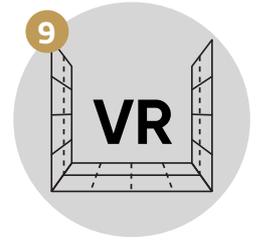


Nach wenigen Sekunden erscheint eine Berglandschaft. Helfen Sie dem Trainee sich im Raum zu bewegen, um die VR-Raumgrenzen zu testen.



Lassen Sie den Trainee das Modul spielen

Starten Sie das Trainingsmodul auf dem Laptop. Überwachen Sie den Trainee und bieten Sie bei Bedarf Unterstützung an.

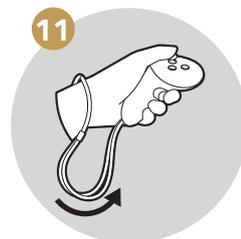

Nach Beendigung des Trainingsmoduls nehmen Sie die Controller von den Handgelenken des Trainees ab und legen sie in die Dockingstation zurück. Helfen Sie beim Abnehmen des Headset und begleiten Sie den Trainee in die Realität zurück.



Besprechen Sie das Training und gehen Sie auf individuelle Bedürfnisse ein.



Desinfizieren Sie die VR-Hardware-Oberflächen, die in direktem Kontakt mit der Haut des Trainees standen.




Schließen Sie das Trainingsmodul.

Nach dem Training



Nehmen Sie den Akku von der Rückseite des Headsets ab und setzen Sie ihn wieder in die Ladestation ein.

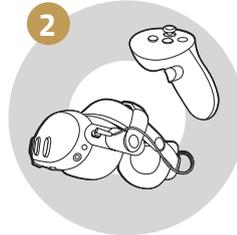

Bewahren Sie das VR-Headset sicher auf und verschließen Sie es. Denken Sie daran, dass direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu Schäden führen können.



Schließen Sie alle Anwendungen auf dem Laptop, aber lassen Sie den Laptop eingeschalten.



Wenn alle Schritte abgeschlossen sind, reinigen Sie den Arbeitsbereich.

Fragen?

Unsere Anleitungen zur Fehlerbehebung helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme.

Besuchen Sie unser Support-Portal support.innerspace.eu oder kontaktieren Sie unseren Helpdesk unter support@innerspace.eu



Fragen?

Unsere Anleitungen zur Fehlerbehebung helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme.

Besuchen Sie unser Support-Portal **support.innerspace.eu** oder kontaktieren Sie unseren Helpdesk unter **support@innerspace.eu**